



RT150

INJECTEUR DE PRODUIT DE CONTRASTE
DÉDIÉ À L'ANGIOGRAPHIE ET À LA CARDIOLOGIE

APOLLO RT

Les techniciens et les
professionnels du service





Ergonomique

- Le centre de gravité bas assure la stabilité.
- Grandes roulettes avec freins pour une mobilité et un positionnement aisés.
- Le long bras d'extension permet un positionnement flexible.

Polyvalent

- Injections uniques et répétées, injections d'essai, mode perfusion.

Sécurité

- Graphique de pression en temps réel.
- Le capteur gyroscopique aide à minimiser les risques d'injection d'air.
- Butée mécanique innovante.
- Messages d'avertissement en couleur.
- L'affichage de la tête (avec données d'injection) répète les principaux paramètres d'injection.
- Les points de fluide imprimés sur le corps de la seringue aident à la détection de l'air.

Pratique

- Grand écran LCD couleur tactile.
- Interface facile.
- Simple et facile à utiliser.
- Mainteneur de chaleur intégré pour une fiabilité accrue.

Puissant

- Mémorisation de 100 protocoles d'injection.
- L'écran de résultats affiche les 100 dernières injections, avec un graphique de pression en temps réel.

Innovant

- Débit variable exclusif (en option) pour des protocoles cardiaques spécifiques, via une télécommande supplémentaire.




Spécifications Techniques

Ci-dessous se trouvent les données à température ambiante.

Tête d'injection

Débit	0.1~40ml/s
Chauffage de la seringue	37°C ± 2°C
Taille de la seringue	150ml

Vitesse de charge (avant/arrière)	2.5ml/s
Avance/retour rapide	8.0ml/s
Rallonge	15m

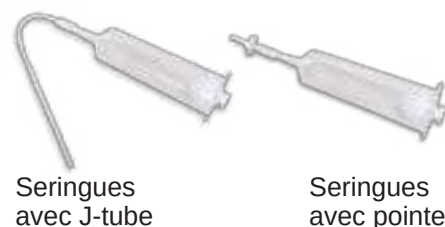

Seringues
avec J-tube

Seringues
avec pointe

Poids

Poids total	79kg
Tête d'injection	8.8kg
Console	2.0kg
Bras d'extension	3.9kg
Chariot	64.3kg

Alimentation requise

Tension nominale	115/230VAC 50/60Hz
Puissance nominale	370VA

Longueur du cordon

Câble d'alimentation	5m
Câble de commande manuelle	2m (5m câble spiralé en option)
Câble de commande au pied	8m
Câble de interface	15m

Injecteur

Mode d'injection	Jusqu'à 4 phases de injection	
Temps de montée en puissance	0.0~9.9s	Augmentation de 0.1s
Intervalle	0~300S	
Délai de balayage	0~300S	
Délai radiographique	0~300S	
Limite de pression	1200PSI	Augmentation de 10PSI, 100PSI Min.
Injection de perfusion		
Débit	1 ~60ml/min	Augmentation de 1ml/s
Pression	200 PSI	Fixé
Volume	150ml	Augmentation de 1ml
Injection test		
Débit	0.5~3ml/s,	Augmentation de 1ml/s
Pression	200 PSI	Fixé
Volume	1~5ml	Augmentation de 1ml
Debit variable		
Débit	0.1~8ml/s	Augmentation de 0.1ml/s
Pression	100~1000 PSI	
Volume	1~10ml	

Mémoires





Memoire	100
Historique	100, affiche également le graphique de pression en temps réel.

Interfaçage

Le module d'interface universel est fourni en standard et offre une connectivité complète avec tous les fabricants d'équipement d'origine.

- APOSTAR se réserve le droit d'améliorer le produit et de modifier la conception sans préavis.

Dimensions du chariot et de la tête d'injection (en mm)

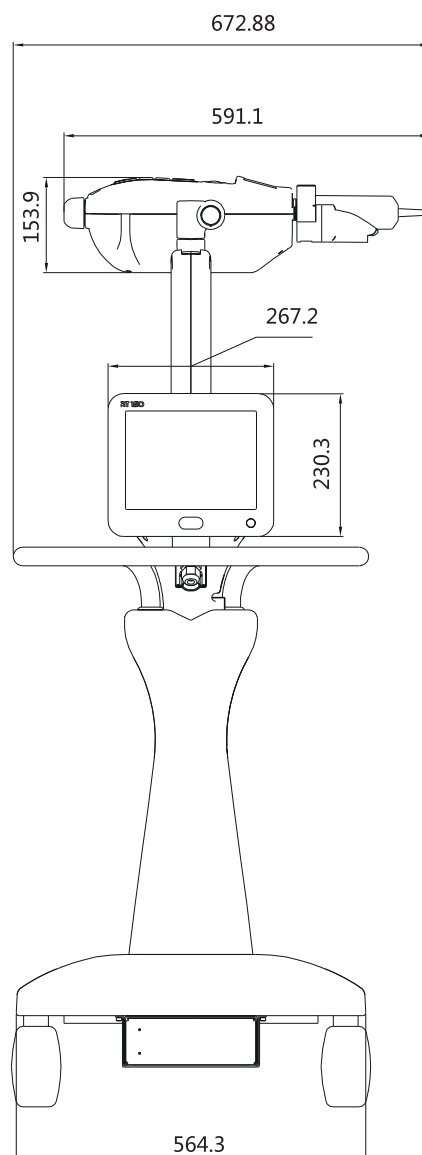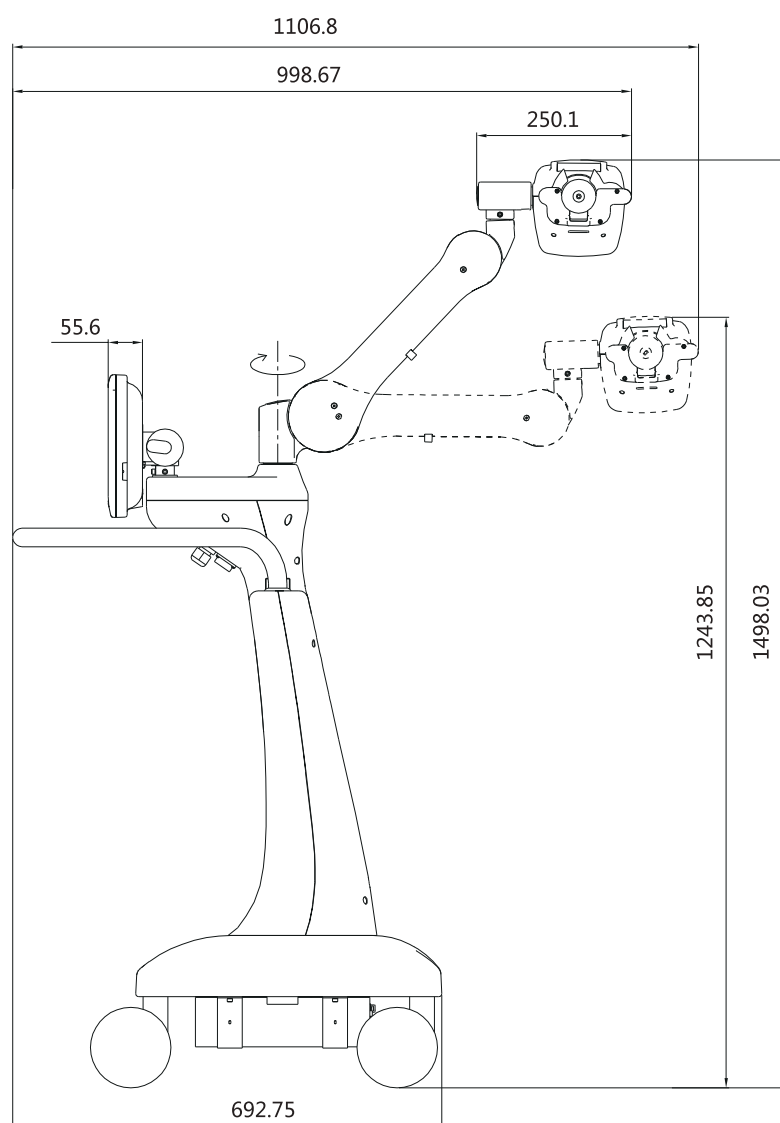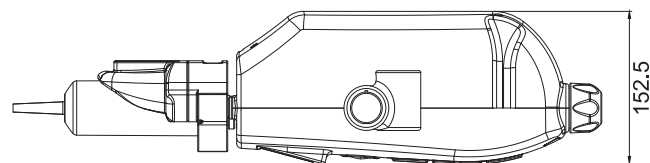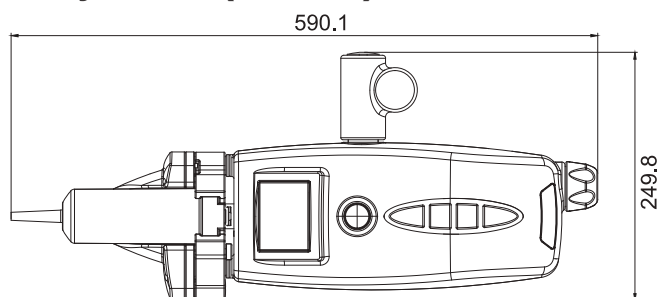

APOLLO RT Co., Ltd.

Unit 1101, 11/F, Tower 1, Cheung Sha Wan Plaza,
833 Cheung Sha Wan Road, Lai Chi Kok, Kowloon, Hong Kong
Tel: (+86)852-2781-3481
E-mail: Contact@apollo-rt.com

Fabriqué pour APOLLO RT par
APOSTAR Medical (Shanghai) Limited

Suit B, 2/F, Building 3, No.1151, Lianxi Rd., Pudong, Shanghai